

تعليمات الاستخدام
ارتدي

تعليمات الاستخدام

ارتدي

1) اختر حجمك الصحيح. تأكد من أن المنتج مناسب للتطبيق

2) اخراج المذبحة، تتكشف المعطف بعناية

تحقق من تذبذب أي عيوب مثل الثقوب أو الدموع واستبدالها إذا تالفة

3) انتقل إلى منطقة بعيدا عن مخاطر التلوث وأماكن العمل

تأكد من أن لديك جميع معدات الحماية الشخصية الخاصة بك في متناول اليد

الخاص بك أو يشكل PPE في وضع الجلوس، قم بإزالة الأحذية والملابس الضخمة والمجوهرات وأي شيء آخر قد يتداخل مع مخاطر السلامة

4) وضع المذبحة على

بدون أحذية، أدخل ساقك بعناية في المذبحة من خلال توجيه قدمك وتوجيهها بعناية من خلال فتح الكاحل. كرر مع ساق أخرى ثم سحب المغطاء إلى الخصر الخاص بك. أدخل ذراعيك إلى الأكمام

5) نشمر أرجل المغطاء ووضعها على الأحذية الخاصة بك، ثم لفة أرجل المغطاء مرة أخرى لغطاء كامل الساق والكاحل بالكامل

سحب غطاء محرك السيارة فوق الرأس، وسحب ببطء الرمز البريدي من الأسفل إلى الأعلى وكل الطريق حتى الذقن

doffing.

1) إزالة أكبر قدر ممكن من التلوث من المأزق الخاص بك

2) انتقل إلى منطقة مخصصة بعيدا عن الأخطار التلوث وياحض مكان العمل

تأكد من أنك سهلة الوصول إلى مرافق التخلص المناسبة

تأكد من أن لديك شخص ما أو شيء ما لإجراء الاستقرار

3) بدءا من غطاء محرك السيارة، اسحب المذبحة إلى أسفل والخروج منه

إزالة الجزء العلوي من الجسم والأسلحة عن طريق تدحرجه وتثبيت الأكمام. لفة المعطف والخروج

OH-5000 الشفرة

بحجم ل

مع غطاء محرك السيارة، شريط مزدوج على الوجهين على رفر ف بأكملاه. المرن caseall
لون أبيض

مادة

شهادة

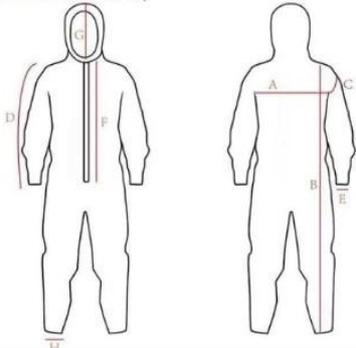
10. 18000 pcs 20 * 1 gp bag 50 cs/carton

Carton size:50 *30*50cm

18000 pcs 20 * 1 gp 45000pcs 40 * 1 hq

3

3

Technical specification							
(All measurement are for the coverall)		No.	S	M	L	XL	XX L
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18



orient Honest
MEDICAL TECHNOLOGY



CE ISO FDA
ISO 13485

orient Honest
MEDICAL TECHNOLOGY



CE ISO FDA
ISO 13485