


Produktname	Einweg -Covelall		
Verwendungszweck	Diese Einwegabdeckung ist für Krankenhäuser, Haushalte, Notfälle, Automobilindustrien, Abfallmanagement, Gartenarbeit, Apotheke, Lebensmittelverarbeitung, Gemälde, Sehenswürdigkeiten, biologische chemische Gefahren, Labors, Rettung und Unterstützung, Bergbau, Öl und Gas konzipiert		
Gebrauchsanweisung	<p>Anziehung</p> <p>1) Wählen Sie Ihre korrekte Größe. Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Anwendungen geeignet ist.</p> <p>2) Entfernen Sie die Abdeckung und öffnen Sie die Overall sorgfältig. Überprüfen Sie Ihre Abdeckung auf alle Mängel wie Löcher oder Tränen und ersetzen Sie, wenn sie beschädigt sind.</p> <p>3) Bewegen Sie sich in einen Bereich, der bei der Arbeit weit entfernt von Kontamination und Gefahren ist. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre persönlichen Schutzausrüstung leicht zugänglich haben. Entfernen Sie in sitzender Position Schuhe, dicke Kleidung, Schmuck und alles, was ärgerlich sein kann AP Sie oder stellen Sie ein Sicherheitsrisiko dar.</p> <p>4) Platzieren Sie eine Abdeckung ohne Schuhe, legen Sie Ihre Füße sorgfältig in die Overall, indem Sie Ihre Füße zeigen und sie sorgfältig durch die Öffnung des Knöchels führen. Wiederholen Sie mit den anderen Beinen und ziehen Sie die Abdeckung an Ihre Taille. Leg deine Arme in den Arm.</p> <p>5) Rollen Sie die Fußabdeckung und legen Sie Ihre Schuhe. Rollen Sie den Fuß nach unten, um das Unterbein und die Knöchel vollständig abzudecken. Methode Zum Kinn.</p> <p>Ausrüstung</p> <p>1) Entfernen Sie so viele Kontaminationen wie möglich von Ihrer Abdeckung.</p> <p>2) Bewegen Sie sich in den ausgewiesenen Bereich weit entfernt von Kontaminationen und Gefahren bei der Arbeit. Stellen Sie sicher, dass Sie von der entsprechenden Entsorgungsanlage leicht zugänglich sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jemanden oder etwas zur Stabilität haben.</p> <p>3) Ziehen Sie aus der Motorhaube die Deckung nach unten und heraus. Entfernen Sie die Oberseite des Körpers und der Arme, indem Sie ihn rollen und den Ärmel des Hemdes drehen. Herunterrollen Covelall und kommen Sie heraus.</p>		
Code	OH-5000	Größe	L
Modell	Mit einer Kapuze, einem zweiseitigen Kleband während der Klappe. Elastische Kapuze und Knöchel, geschnitten und genäht, weiß, weiß		
Zutat	60% Polypropylen + 40% Polyeten, 55 ± 3% GSM,		
Zertifikat	Typ5/6, en ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385		
Packt	10 PCs in Polybeutel, 50 PCs/Karton, Pappgröße: 50 *30 *50 cm Last Qty: 18000pcs in 1*20gp, 45000 PCs in 1*40HQ		
Haltbarkeit	3 Jahre		

		Technical specification					
(All measurement are for the coverall)		No.	S	M	L	XL	XX L
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18

Fotografieren:

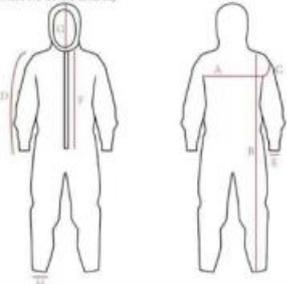

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

