

nombre del producto

Overall desechable

Uso previsto

Este desechable onda está diseñado para hospital, hogar, emergencia, industria de automóviles, gestión de residuos, jardinería, farmacéutica, procesamiento de alimentos, pintura, excursiones, peligros químicos biológicos, laboratorio, rescate y Alivio, minería, petróleo y gas

Instrucciones de uso

Tacaño

- 1) Elija su tamaño correcto. Asegúrese de que el producto sea adecuado para la aplicación.
- 2) Saque la cubierta, despliegue cuidadosamente la capa

Revise su OverTall para cualquier defecto, como agujeros o lágrimas, y reemplácelo si está dañado.

- 3) Muévase a un área lejos de la contaminación y los riesgos del lugar de trabajo.

Asegúrese de tener todos sus equipos de protección personal a poca distancia.

En una posición sentada, retire el calzado, la ropa voluminosa, la joyería y cualquier otra cosa que pueda interferir con su PPE o plantear un riesgo de seguridad.

- 4) Poner la Overlall en

Sin calzado, inserte cuidadosamente su pierna en la cubierta apuntando su pie y guíale con cuidado a través de la abertura del tobillo. Repita con otra pierna y luego tire de la cubierta a su cintura. Inserte con cuidado sus brazos a las mangas.

- 5) Enrolle las piernas de la cubierta y colóquelas en su calzado, luego enrolle las piernas de la cubierta hacia abajo para cubrir completamente la parte inferior de la pierna y el tobillo

Tire de la capucha sobre la cabeza, tire lentamente la cremallera de abajo hacia arriba y hasta la barbilla.

Dofing

- 1) Retire la mayor cantidad posible de contaminación posible de sus defectos.
- 2) Muévase a un área designada lejos de la contaminación y los riesgos del lugar de trabajo.

Asegúrese de que esté a poca distancia de las instalaciones de eliminación apropiadas.

Asegúrese de tener a alguien o algo que lo sostenga para la estabilidad.

- 3)Comenzando en el capó, tire de la cubierta hacia abajo y salga de él.

Extracción de la parte superior del cuerpo y los brazos rodándolo e invocando las mangas. Enrolle la cubierta y salga.

código

OH-5000

Talla

L

modelo

Averpase con capucha, cinta de doble cara sobre todo el colgajo. Elástico Campos y tobillos, costuras cortadas y cosidas,el color blanco

Material

60% de polipropileno + 40% de poleetileno, 55 ± 3% GSM,

Certificado

Type5 6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010De

EN 13034: 2005 + A1: 2009 , EN 14325: 2004

FDA, ISO12385

Embalaje

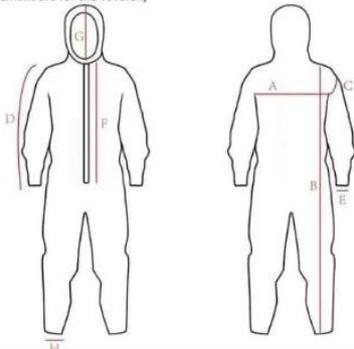
10 ordenador personals en un escuela politécnica bag, 50 pagcs/CartonDe

Carton size:50 *30*50cm

Cantidad de carga: 18000pcs en 1 * 20GP, 45000 PCS en 1 * 40HQ

Duracion

3 años

Technical specification								
<p>(All measurement are for the coverall)</p> 	No.	S	M	L	XL	XX L		
	chest	A	110	120	130	140	150	
	Total length	B	160	165	170	175	180	
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60	
	Length of hood	G	18	18	18	18	18	

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO13485

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO13485

 orient Honest
MEDICAL SUPPLY CO., LTD.



CE  **ISO 13485** **FDA**