

Nom du produit

Couverture jetable

Usage prévu

Ce jetable couvre-toi est conçu pour l'hôpital, le ménage, l'urgence, l'industrie automobile, la gestion des déchets, le jardinage, la pharmacie, la transformation des aliments, la peinture, la sortie, le danger chimique biologique, le laboratoire, le sauvetage et Soulagement, mines, pétrole et gaz

Instruction d'utilisation

Don

1) Choisissez votre taille correcte. Assurez-vous que le produit convient à l'application.

2) Sortez la couverture, dépliez la couverture attentivement

Vérifiez votre couverture pour tout défaut tel que des trous ou des larmes et remplacez s'il est endommagé.

3) Déplacer dans une zone à l'écart des dangers de la contamination et du lieu de travail.

Assurez-vous que tous vos équipements de protection individuelle sont facilement accessibles.

En position assise, enlevez des chaussures, des vêtements volumineux, des bijoux et tout ce qui peut nuire à votre PPE ou poser un risque de sécurité.

4) mettre la couverture sur

Sans chaussures, insérez soigneusement votre jambe dans la combinaison en pointant votre pied et en le guidant soigneusement à travers l'ouverture de la cheville. Répétez l'opération avec une autre jambe, puis tirez la combinaison sur votre taille. Insérez vos bras sur les manches.

5) Rouler les jambes de la combinaison et mettre sur vos chaussures, puis rouler les jambes de la recouvrement de la couverture pour couvrir complètement la jambe et la cheville inférieure

Tirez le capot sur la tête, tirez lentement le zip du bas en haut et jusqu'au menton.

Déchaînement

1) Retirez autant de contamination que possible de vos couvertures.

2) Déplacez-vous dans une zone désignée loin de la contamination et des dangers en milieu de travail.

Assurez-vous que vous êtes à portée de main des installations d'élimination appropriées.

Assurez-vous d'avoir quelqu'un ou quelque chose pour conserver la stabilité.

3) En commençant par le capot, tirez le couvercle vers le bas et sortez-le.

Retrait de la partie supérieure du corps et des bras en le roulant et en inversant les manchons. Rouler la couverture et sortir.

code

OH-5000

Taille

L

maquette

Combinaison avec capuche, ruban adhésif double face sur tout le rabat. Élastique Hood et chevilles, coutures coupées et cousues, couleur blanche

Matériel

60% de polypropylène + 40% de polyéthylène, 55 ± 3% GSM,

Certificat

Type5 6,EN ISO 13688:2013 ,EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010,

EN 13034:2005 +A1:2009 ,EN 14325:2004

FDA,ISO12385

Emballage

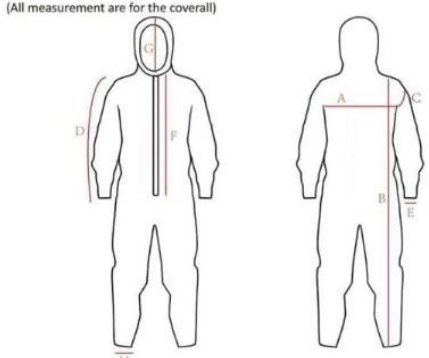
10 pc S dans un poly sac, 50 p CS / Carton,

Carton size:50 *30*50cm

Loading Qty: 18000pcs en 1 * 20gp, 45000pcs en 1 * 40HQ

Durée de conservation

3 années

Technical specification							
(All measurement are for the coverall) 	No.	S	M	L	XL	XX L	
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

 orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

