

nama Produk	Coverall sekali pakai		
Penggunaan yang dimaksudkan	Coverall sekali pakai ini dirancang untuk rumah sakit, rumah tangga, darurat, industri mobil, pengelolaan limbah, berkebun, farmasi, pengolahan makanan, lukisan, tamasya, bahaya kimia biologis, laboratorium, penyelamatan dan bantuan, pertambangan, minyak dan gas		
Petunjuk penggunaan	<p>Donning</p> <p>1) Pilih ukuran Anda yang benar. Pastikan produk cocok untuk aplikasi.</p> <p>2) Keluarkan coverall, buka coverall dengan hati -hati.</p> <p>Periksa coverall Anda untuk segala cacat seperti lubang atau air mata dan ganti jika rusak.</p> <p>3) Pindah ke daerah yang jauh dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda memiliki semua peralatan pelindung pribadi Anda dengan mudah dijangkau.</p> <p>Dalam posisi duduk, lepaskan alas kaki, pakaian tebal, perhiasan dan apa pun yang dapat mengganggu AP Anda atau menimbulkan risiko keselamatan.</p> <p>4) Menempatkan coverall tanpa alas kaki, masukkan kaki Anda dengan hati -hati ke dalam coverall dengan mengarahkan kaki Anda dan dengan hati -hati membimbingnya melalui pembukaan pergelangan kaki. Ulangi dengan kaki lain dan kemudian tarik coverall ke pinggang Anda. Masukkan lengan Anda ke lengan.</p> <p>5) Gulung kaki penutup dan letakkan alas kaki Anda, lalu gulung kaki penutup ke bawah untuk sepenuhnya menutupi kaki bagian bawah dan pergelangan kaki. cara sampai dagu.</p> <p>Doffing</p> <p>1) Hapus kontaminasi sebanyak mungkin dari coverall Anda.</p> <p>2) Pindah ke area yang ditunjuk jauh dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda mudah dijangkau dari fasilitas pembuangan yang sesuai.</p> <p>Pastikan Anda memiliki seseorang atau sesuatu untuk dipegang stabilitas.</p> <p>3) Mulai dari kap, tarik coverall ke bawah dan keluar dari itu.</p> <p>Menghapus bagian atas tubuh dan lengan dengan menggulungnya dan membalikkan lengan baju. Gulung ke bawah Coverall dan keluar.</p>		
kode	OH-5000	ukuran	L
model	Coverall dengan tudung, selotip dua sisi di seluruh flap. Tudung elastis dan pergelangan kaki, potong dan jahitan dijahit, warna putih		
Bahan	60% polypropylene + 40% polyethylene, 55 ± 3% GSM,		
Sertifikat	Tipe5/6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385		
Sedang mengemas	10 pcs dalam kantong poli, 50 pcs/karton, Ukuran karton: 50 *30 *50cm Memuat Qty: 18000pcs dalam 1*20gp, 45000 pcs dalam 1*40hq		
Umur simpan	3 tahun		

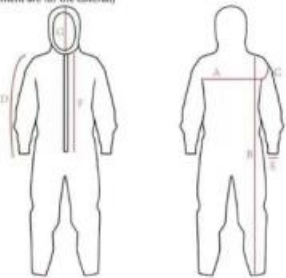
Technical specification							
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L	
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18

Foto-foto:



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

