


Nama Produk	Coverall sekali pakai		
Penggunaan yang dimaksudkan	ini sekali pakai coverall . dirancang untuk rumah sakit, rumah tangga, darurat, industri mobil, pengelolaan limbah, berkebun, farmasi, pengolahan makanan, lukisan, tamasya, bahaya kimia biologis, laboratorium, penyelamatan dan relief, Mining, Oil and gas		
Petunjuk penggunaan	<p>Donning</p> <p>1) Choose your correct size. Ensure that the product is suitable for the application.</p> <p>2) take out the coverall, Unfold the coverall carefully</p> <p>Check your coverall for any defects such as holes or tears and replace if damaged.</p> <p>3) Pindah ke area yang jauh dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda memiliki semua peralatan pelindung pribadi Anda dengan mudah.</p> <p>Dalam posisi duduk, lepaskan alas kaki, pakaian besar, perhiasan dan apa pun yang dapat mengganggu PPE Anda atau menimbulkan risiko keselamatan.</p> <p>4) Menempatkan penutup</p> <p>Tanpa alas kaki, masukkan kaki Anda dengan hati-hati ke coverall dengan menunjuk kaki Anda dan dengan hati-hati membimbingnya melalui pembukaan pergelangan kaki. Ulangi dengan kaki lain dan kemudian tarik coverall ke pinggang Anda. Dengan sepenuh hati masukkan lengan Anda ke lengan baju.</p> <p>5) Gulung kaki coverall dan masukkan ke dalam alas kaki Anda, lalu gulung kaki coverall kembali ke bawah untuk menutupi sepenuhnya kaki dan pergelangan kaki</p> <p>Tarik tudung di atas kepala, perlahan-lahan tarik zip dari bawah ke atas dan sampai ke dagu.</p> <p>Doffing.</p> <p>1) Hapus kontaminasi sebanyak mungkin dari coverall Anda.</p> <p>2) Pindah ke area yang ditunjuk dari kontaminasi dan bahaya di tempat kerja.</p> <p>Pastikan Anda mudah dijangkau dari fasilitas pembuangan yang sesuai.</p> <p>Pastikan Anda memiliki seseorang atau sesuatu untuk ditahan untuk stabilitas.</p> <p>3) Mulai dari kap, tarik coverall ke bawah dan keluarlah.</p> <p>Menghapus bagian atas tubuh dan lengan dengan menggulungnya dan membalikkan lengan baju.</p> <p>Gulung coverall dan keluar.</p>		
kode	OH-5000	ukuran	L.
model	Coverall dengan tudung, selotip dua sisi di atas seluruh flap. Elastis Hood dan Wasple, memotong dan dijahit jahitan, warna putih		
Bahan	60% polypropylene + 40% polyethylene, 55 ± 3% GSM,		
Sertifikat	Type 5 6, id ISO 13688: 2013, id ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010, EN 13034: 2005 + A1: 2009, EN 14325: 2004 FDA, ISO12385.		
Sedang mengemas	10 PC.s di sebuah poly bag, 50. pcs/Carion, Carton size: 50 * 30 * 50cm Memuat QTY: 18000 pcs dalam 1 * 20GP, 45000 pcs dalam 1 * 40HQ		
Umur simpan	3 tahun		

Technical specification

(All measurement are for the coverall)

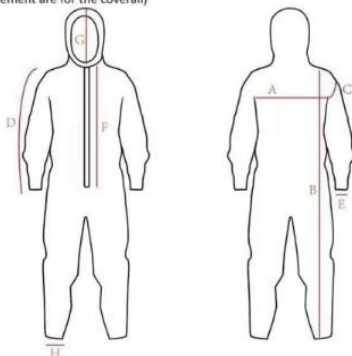

	No.	S	M	L	XL	XX L
chest	A	110	120	130	140	150
Total length	B	160	165	170	175	180
Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
Length of hood	G	18	18	18	18	18

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

 orient Honest
MEDICAL SUPPLY CO., LTD.



CE  **ISO 13485** **FDA**