

Semua topeng terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

- Bahan non-linting halus dan nyaman untuk menghilangkan iritasi kulit
- Lapisan konstruksi yang sangat bernapas tetap dingin, bahkan selama kasus lama
- telinga super lembut Loop membuat nyaman dipakai untuk waktu yang lama

Klip hidung

Jembatan hidung yang dapat disesuaikan,

Tali telinga elastis lembut

Telinga kait telinga elastis tinggi untuk waktu yang lama.

Bukti Air

Tes bukti air, lebih bernapas

Lipat desain

Mudah diterima

Produk Spesifikasi:

| | |
|-----------------------|--|
| Nama | Masker wajah KF94 sekali pakai |
| Bahan kain | Layer 1: PP Non Woven (cetak yang disesuaikan) Layer 2: kertas filtrasi tinggi Layer 3: kertas filtrasi tinggi Layer4: pp non woven |
| Gaya | 4ply, dengan putaran telinga loop |
| Ukuran dimensi | 20 * 8 cm |
| berat kain | 30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, bisa sebagai permintaan Anda |
| Warna | Masker berwarna-warni |
| Sertifikat | ce, iso13485, fda |
| moq | 20000 pcs |
| Desain Pengemasan | bisa sebagai desain Anda |
| packing | 50 pcs /box, 2000 pcs /ctn, atau sebagai kebutuhan Anda |
| kemampuan | 1 juta pcs per hari |
| Waktu pengiriman | 7-30 hari |
| Aplikasi | Rumah Sakit, Laboratorium, Klinik, Industri Makanan, Lokakarya Bebas Debu |

gambar KF94













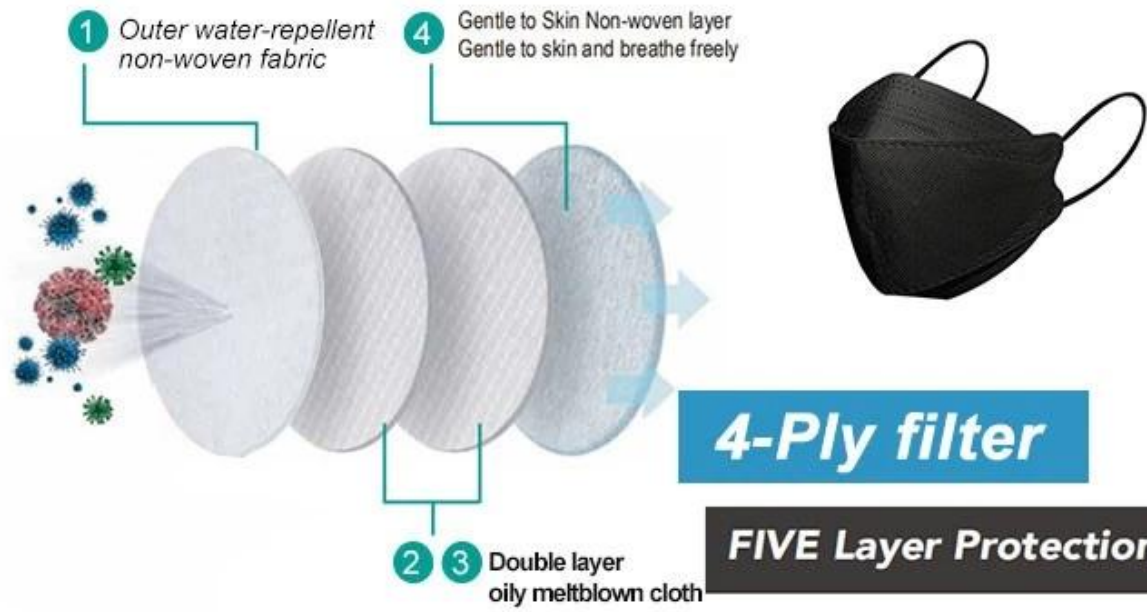

Invisible Adjustable Soft Nose Clip
Better Fit Your Face
Barrier the Up Direction Air



High Strength Ear Loop
Comfortable Ware
No Hurt or Harm to Your Ear with
Long Period Wearing

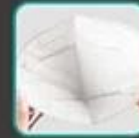

Extra Soft Accessible
Skin Layer Inside soft
Non-Woven Protective Layer
No Harm to your Skin

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.