

Tutte le maschere sono realizzate con materiali di altissima qualità, fornendo un'eccellente protezione e un comfort superiore:

- I materiali non leggi sono lisci e comodi per eliminare l'irritazione della pelle
- Gli strati di costruzione altamente traspiranti rimangono freschi, anche durante i casi lunghi
- Loop auricolare super morbido rende il consumo comodo per molto tempo

Clip del naso

Ponte naso regolabile

Cinghia auricolare elastico morbido

Orecchie di orecchie ad alto orecchie elastiche elevate per molto tempo

Impermeabile

Test a prova d'acqua, più traspirante


Design piega

Facile da ricevere

Specifiche del prodotto:

Nome	Maschera per il viso usa e getta KF94
Materiale in tessuto	Strato 1: PP non tessuto (stampa personalizzata) Livello 2: carta ad alta filtrazione Livello 3: carta ad alta filtrazione Strato 4: pp non tessuto
Stile	4plici, con anello auricolare piatto da 3,2 mm
Dimensione delle dimensioni	20 * 8 cm
Peso del tessuto	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, potrebbe essere come la tua richiesta
Colore	Maschera gradiente di colore
Certificato	CE, ISO13485, FDA
Moq	20000 pezzi
Progettazione di imballaggio	Può essere come il tuo design
Imballaggio	50 pezzi /scatola, 2000 pezzi /CTN o come requisito
Capacità	1 milione di pezzi al giorno
Tempo di consegna	7-30 giorni
Applicazioni	hospital, laboratory, clinic, food industry, dust-free workshop

The picture of KF94

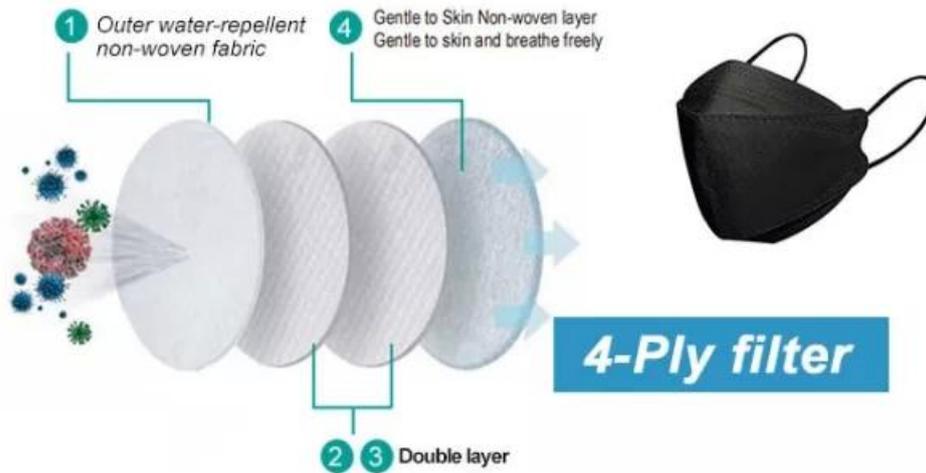

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





