

Nome do Produto

>CoverAll descartável

>Uso pretendido

Este descartável >CoverAll foi projetado para hospital, família, emergência, indústria automobilística, gerenciamento de resíduos, jardinagem, farmacêutica, processamento de alimentos, pintura, passeio, risco químico biológico, laboratório, resgate e> alívio, mineração, petróleo e gás

Instrução para uso

Vestindo

- 1) Escolha o seu tamanho correto. Verifique se o produto é adequado para o aplicativo.
- 2) Retire o CoverAll, desdobre o CoverAll com cuidado

Verifique o seu CoverAll para obter defeitos, como orifícios ou lágrimas, e substitua se danificada.

- 3) Mova-se para uma área longe de perigos de contaminação e local de trabalho.

Certifique-se de ter todos os seus equipamentos de proteção individual de fácil acesso.

Em uma posição sentada, remova calçado, roupas volumosas, jóias e qualquer outra coisa que possa interferir com o seu PPE ou representar um risco de segurança.

- 4) colocando a secreta em

Sem calçado, insira cuidadosamente a perna na seção apontando seu pé e orientando cuidadosamente a abertura do tornozelo. Repita com outra perna e depois puxe a secreta para a cintura. Insira os braços para as mangas.

- 5) enrole as pernas do macacão e coloque em seu calçado, em seguida, role as pernas da secreta de volta para cobrir totalmente a perna e o tornozelo

Puxe o capô sobre a cabeça, puxe lentamente o zip de baixo para cima e todo o caminho até o queixo.

Doffing.

- 1) Remova o máximo de contaminação possível de suas massacias.
- 2) Mova-se para uma área designada longe de perigos de contaminação e local de trabalho.

Certifique-se de que você esteja com uma fácil acesso das instalações de eliminação apropriadas.

Certifique-se de ter alguém ou algo para se manter por estabilidade.

- 3)Começando no capô, puxe a secreta para baixo e saia dela.

Removendo a parte superior do corpo e os braços, rolando -o e invertendo as mangas. Role o capa e saia.

>código

OH-5000

>Tamanho

eu

>modelo

CoverAll com capuz, fita dupla face sobre toda a aba. Elástico Capuz e tornozelos, costuras cortadas e costuradas, cor branca

>Material

60% polipropileno + 40% de polietileno, 55 ± 3% GSM,

>Certificado

TYPE5 6, EN ISO 13688: 2013, EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010,

EN 13034: 2005 + A1: 2009 , EN 14325: 2004

FDA, ISO12385.

>Embalagem

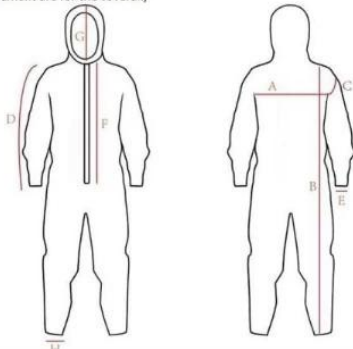
10 PCs em um poli bag, 50 P.cs/Carton,

Carton size:50 *30*50cm

Carregando QTY: 18000pcs em 1 * 20GP, 45000pcs em 1 * 40HQ

Validade>

3 anos

Technical specification							
(All measurement are for the coverall)	No.	S	M	L	XL	XX L	
	chest	A	110	120	130	140	150
	Total length	B	160	165	170	175	180
	Length of sleeve	D	58	58	60	60	60
	Length of hood	G	18	18	18	18	18

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



CE ISO FDA
ISO 13485

 orient Honest
MEDICAL SUPPLY COMPANY



CE  **ISO 13485** **FDA**