

Todas las máscaras están hechas de materiales de la más alta calidad, que proporcionan una excelente protección y comodidad superior:

- Los materiales no encendidos son suaves y cómodos para eliminar la irritación de la piel
- Las capas de construcción altamente transpirables permanecen frías, incluso durante los casos largos
- El bucle de oreja súper suave hace que el uso sea cómodo durante mucho tiempo

Clip de la nariz

Puente de la nariz ajustable

Correa de oreja elástica suave

Las orejas de gancho de oído elásticos altos durante mucho tiempo

Impermeable

Prueba a prueba de agua, más transpirable


Diseño de pliegues

Fácil de recibir

Especificaciones del producto:

Nombre	Máscara facial de KF94 desechable
Material de tela	Capa 1: PP no tejida (impresión personalizada) Capa 2: Documento de filtración alto Capa 3: Documento de filtración alto Capa 4: PP no tejida
Estilo	4ply, con bucle de oreja plana de 3.2 mm
Tamaño de dimensiones	20 * 8 cm
Peso de la tela	30GSM + 25GSM + 25GSM + 25 GSM, podría ser como su solicitud
Color	Máscara de gradiente de color
Certificado	CE, ISO13485, FDA
Moq	20000 PCS
Diseño de embalaje	puede ser como tu diseño
Embalaje	50 pcs /caja, 2000 PCS /CTN, o como su requisito
Capacidad	1 millón de pcs por día
El tiempo de entrega	7-30 días
Aplicaciones	Hospital, laboratorio, clínica, industria alimentaria, taller sin polvo

La imagen de KF94

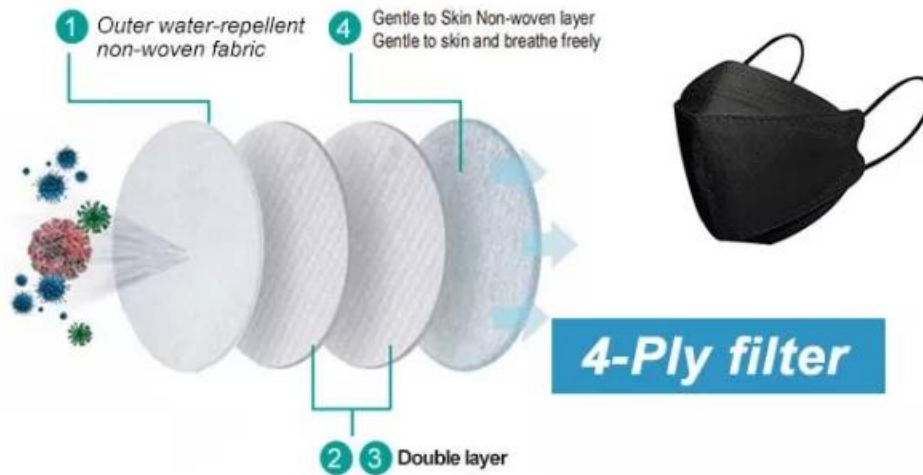

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





