

Todas as máscaras são feitas de materiais da mais alta qualidade, proporcionando excelente proteção e conforto superior:

- Materiais não circulantes são suaves e confortáveis para eliminar a irritação da pele
- Camadas de construção altamente respiráveis permanecem frias, mesmo durante casos longos
- Loop super macio da orelha se sente confortável por usar por muito tempo

Clipe do nariz

Ponte do nariz ajustável

Cinta de orelha elástica macia

Orelhas de orelhas elásticas de orelha elástica por um longo tempo

À prova d'água

Teste de prova de água, mais respirável


Design de dobra

Fácil de receber

Especificações do produto:

Nome	Máscara facial descartável KF94
Material de tecido	Camada 1: pp non woven (impressão personalizada) Camada 2: papel de filtragem alta Camada 3: papel de filtragem alta Camada 4: pp non woven
Estilo	4ply, com loop de orelha plana de 3,2 mm
Tamanho das dimensões	20 * 8 cm
Peso de tecido	30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, pode ser como sua solicitação
Cor	Máscara de gradiente de cores
Certificado	CE, ISO13485, FDA
MOQ	20000 PCs
Design de embalagem	pode ser como seu design
Embalagem	50 PCs /caixa, 2000 PCs /CTN, ou como sua exigência
Capacidade	1 milhão de PCs por dia
Tempo de entrega	7-30 dias
Formulários	Hospital, laboratório, clínica, indústria de alimentos, oficina sem poeira

The picture of KF94

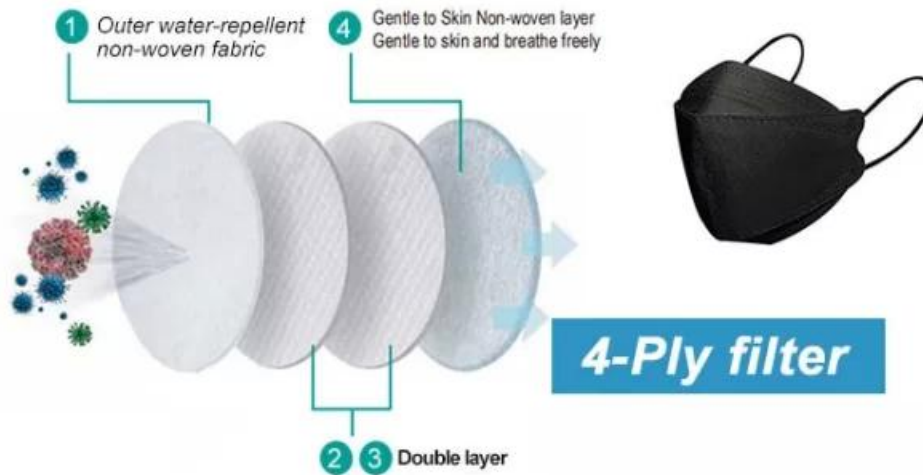

HOW TO USE



- 1 Remove mask from packaging.
- 2 Wear the mask to cover your nose and chin.
- 3 Hook each strap over your ear to lock them in place
- 4 Press the nose piece with the fingers of both hands so that the mask is in close contact with your face.

Precautions for Use

1. Make sure not to place towel, tissue, etc. inside of the mask.
2. Do not use if the inside of the mask is contaminated.
3. Do not touch the surface of the mask after wearing.
4. This mask is disposable. Do not wash your mask.





